



WOORHI MEDICAL

Since 1983

우리메디칼 주식회사







더마퀸

안티에이징 주사

더마퀸은 음압이 주사하는 동안 피부를 잡아주는 동시에 여러 개의 바늘로 구성된 멀티 니들로 피부에 쉽고 빠르게 주입할 수 있습니다.

또한, 시술 중 원하는 피부층에 약물을 균일하게 주입하여 정교한 시술로 효과를 높이고 지속적인 약물 주입이 가능하여 시술 중 약물 손실 및 통증을 줄여줍니다.

특징

-  10cc 크기의 주사기를 포함한 모든 유형의 주사기 장착 가능
-  디지털 방식으로 모든 기능 제어
-  주입 길이 및 양 조정 가능
-  약물 손실 최소화

게이지 : 31G, 32G
핀 : 5 pin, 9 pin, 16 pin
Coming soon



Multi Needle







Portable type



Stand type

일회용 수동식 의료용 칼 (CE)

특징

-  특수 열처리에 의한 최상의 품질 보장
-  감마선 / EO 가스에 의한 멸균
-  최신 자동 연삭기를 통한 예리한 연마
-  특수 스테인리스 스틸로 제작




Use Handle No.3




Use Handle No.4



Chisel blade

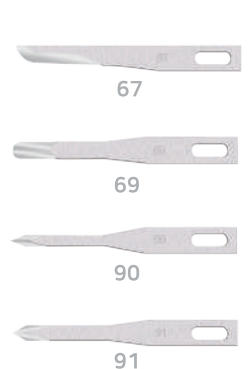

봉합사

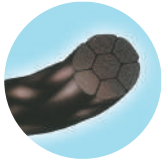


SILK

Color ○ ●

Size USP 8/0 ~ 1 | EP 0.4 ~ 4

탈검공법을 통해 순도 높은 천연 실크로 만들어진 봉합사로 높은 인장강도를 위해 중심부터 얇은 실들을 느린 속도로 정교히 뿜아 만듭니다. 안정적으로 매듭을 지을 수 있습니다.

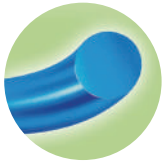

NYLON

Color ○ ● ●

Size USP 10/0 ~ 2 | EP 0.2 ~ 5

나일론은 모노필라멘트로 이루어져 있고, 박테리아 증식을 최소화할 수 있습니다. 한 가닥으로 이루어져 있고 표면이 매끄러워 조직을 쉽게 통과할 수 있습니다.




POLYESTER

Color ○ ●

Size USP 6/0 ~ 2 | EP 0.7 ~ 5

폴리에스터로 이루어진 가는 실들을 엮은 후 실리콘 코팅 처리를 합니다. 복선사로 인장강도가 뛰어나고 핸들링 및 매듭의 안정성이 우수합니다. 코팅 처리로 조직을 부드럽게 통과합니다.

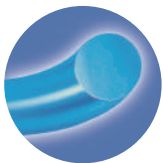

POLYPROPYLENE

Color ●

Size USP 8/0 ~ 1 | EP 0.4 ~ 4

조직을 강하고 안정적으로 지지하면서 감염된 부위에도 지속적인 인장강도를 제공합니다. 또한, 내열온도에 강하고 감염위험이 적습니다. 피부조직에 대한 유착성이 약해 실 제거에 용이합니다.

매몰법 전용 봉합사 - 비절개성 안검 성형을 위한 외상성 특수 바늘

Monofilament Nylon, 7/0, 40cm, Round 3/8 double
18mm, 20mm, 24mm / Black, Blue, White

DQ 코스메틱

특징

- 외부로부터 수분 손실을 근본적으로 방지
- 통증 완화로 일상생활에 불편함이 없도록 개발
- 실리콘 기술로 각질 제거 및 보습 유지

성분

- Dimethicone/Vinyl Dimethicone Cross polymer
Dimethicone
Stearyl Dimethicone
Beeswax

건조한 손 & 발 관리

실리콘 기술 통해
피부 장벽 보호



· 80ml

존스 스크류 니들 (CE)

특징

- 1 세계 최초 바늘 길이 조절 가능한 타입 (조절 가능 범위 0 ~ 4mm)
- 진피층 수직 정밀 주입에 최적화
- 한국 특허 / PCT 출원 진행 중
- 주로 HA 필러 및 메소 필러 주입에 사용
- 모든 유형의 주사기에 적합 (최대 10ml 크기)



32G, 34G > Coming soon



White
27G x 7mm
(조절 가능 범위 0 ~ 4mm)
100 Needles



Red
29G x 7mm
(조절 가능 범위 0 ~ 4mm)
100 Needles



Pink
31G x 7mm
(조절 가능 범위 0 ~ 4mm)
100 Needles

존스 디프레서

특징

- 약물 주입 후 피부에 골고루 분산시켜 균일한 흡수 가능

	존스 주입 방식	기존 주입 방식
출혈	출혈 적음	출혈 많음
통증	환자 통증 거의 없음	환자 통증 있음
조직 손상	적음	많음
멍	적음	많음
덩어리	적음	많음
바늘/기술 (게이지, 길이)	- 수직 주입 방식 (균등 분사) - 정확한 피부 두께 - 사용하기 쉬움	- 수평 주입 방식 - 불규칙한 피부 두께 - 사용하기 어려움 - 긴 길이 바늘



2.5 mm cap
얼굴 전체



4 mm cap
코끝



9 mm cap
입술



얼굴 전체



얼굴 전체



볼



턱